

## Couverts Etac Light

Les couverts Etac Light ainsi que l'assiette et les verres Tasty transforment la prise des repas en une expérience plus agréable pour les personnes souffrant de problèmes articulaires. Différents modèles, tous légers, sont disponibles.

Tous les couverts Light disposent d'un manche fonctionnel dont la forme rend la prise stable et confortable et qui visent à compenser la mobilité manuelle réduite des utilisateurs. Chaque forme de couverts à une utilisation spécifique.

### Couverts à manche épais Etac Light

Les couverts à manche épais Light sont conçus pour une prise en main détendue. Leur forme ovale épaisse et leur légèreté ont pour effet d'atténuer la pression sur les doigts.

La cuillère à soupe possède un manche légèrement plus long et plus fin, qui facilite la prise entre le pouce et l'index, manipulation la plus courante avec ce type de cuillère. Pour faciliter la découpe, le manche du couteau est incliné pour soulager la pression de l'index. Il est également doté d'une lame aiguisée spéciale.



### Cuillère coudée Etac Light

Les cuillères coudées Light sont légères et ont été pensées pour compenser le manque de force dans les mains des utilisateurs au cours des repas. Leur long manche en acier inoxydable peut être plié quelque peu afin de compenser le manque de mobilité au niveau du poignet.

*Ces cuillères coudées se déclinent en versions pour droitier et pour gaucher.*



#### Description

Fourchette Light à manche épais	80402002
Cuillère à soupe Light à manche épais	80402004
Couteau Light à manche épais	80402006
Cuillère à café Light à manche épais	80402007
Cuillère coudée Light	
- pour droitier	80403201
- pour gaucher	80403202

#### Dimensions

Fourchette : 18 cm
Cuillère à soupe : 22 cm
Couteau : 21 cm
Cuillère à café : 18 cm
Cuillère coudée : 19 cm

#### Poids

Fourchette : 27 g
Cuillère à soupe : 37 g
Couteau : 23 g
Cuillère à café : 30 g
Cuillère coudée : 35 g

#### Matériaux

Partie métallique :	acier inoxydable
Manche :	plastique ABS

#### Entretien

Adaptées au lave-vaisselle


#### Conception

Ergonomidesign

## Couverts à manche fin Etac Light

Les manches fins procurent une prise confortable entre les doigts. Cette prise en main fonctionnelle est destinée aux utilisateurs dont la force et la mobilité sont tellement limitées qu'ils soulèvent leur main, paume vers le haut. La longueur des manches permet de ne pas devoir lever les couverts aussi haut qu'avec des manches courts.


Une prise fonctionnelle lorsque l'utilisateur n'a pas beaucoup de force.

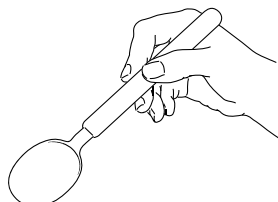

Les manches fins transforment la prise des repas en moment plus agréable pour les personnes présentant une mobilité articulaire extrêmement faible et, par conséquent, d'une capacité de préhension limitée.

## Couverts combinés Etac Light

Les couverts combinés Light se composent d'un couteau et d'une fourchette ou bien d'un couteau et d'une cuillère et sont conçus pour être maniés d'une seule main. Un côté du manche est plat, ce qui assure une prise stable lors de la découpe. L'assortiment couteau/fourchette existe pour les droitiers et les gauchers, tandis que l'assortiment couteau/cuillère est universel.

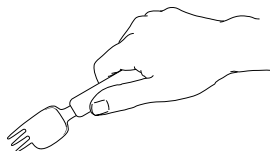

### Description

Fourchette Light à manche fin	80401003
Cuillère à soupe Light à manche fin	80401005
Couteau Light à manche fin	80401001
Cuillère à café Light à manche fin	80401007

Couverts combinés	
Couteau/cuillère Light	80403001
Couteau/fourchette Light pour droitier	80403002
Couteau/fourchette Light pour gaucher	80403003

### Dimensions

Fourchette : 21 cm
Cuillère à soupe : 21 cm
Couteau : 22 cm
Cuillère à café : 20 cm
Couverts combinés :
Couteau/fourchette : 18 cm
Couteau/cuillère : 20 cm

### Poids

Fourchette : 24 g
Cuillère à soupe : 34 g
Couteau : 21 g
Cuillère à café : 26 g

### Poids couverts combinés

Couteau/fourchette : 25 g
Couteau/cuillère : 35 g

### Matériaux

Partie métallique : acier inoxydable  
Manche : plastique ABS

### Entretien

Adaptés au lave-vaisselle

### Conception

Ergonomidesign