


CTX

Table de change murale

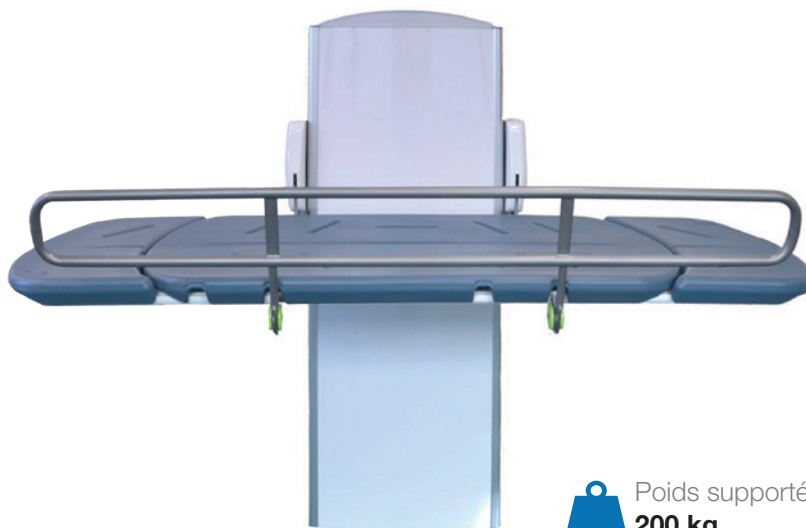

 Poids supporté
200 kg

CTX est une table de change murale haut de gamme pratique et esthétique. Elle répond aux besoins complexes des soins quotidiens afin qu'ils soient réalisés dans des conditions confortables et relaxantes pour le soignant et l'utilisateur.

La hauteur de la table se règle grâce à la télécommande, qui contrôle également la lumière d'ambiance. Cette option garantit un environnement calme et relaxant pour le change et les soins. La partie-tête inclinable améliore aussi le confort du patient.

La table de change CTX a été conçue pour résister à une utilisation en milieu humide avec des pièces en acier inoxydable, un plan de couchage confortable moulé en polyuréthane, équipé de trous d'évacuation qui conduisent l'eau vers un réservoir intégré sous le plan de couchage.

La table de change CTX peut être fixée au sol ou au mur et rangée facilement lorsqu'elle n'est pas utilisée pour gagner de l'espace dans la pièce, maintenue en place grâce à deux vérins à gaz. Elle est équipée d'une batterie de secours pour la descente d'urgence en cas de coupure de courant.



Caractéristiques standards

- Poids supporté : 200 kg
- Hauteur réglable de 150 mm à 890 mm (740 mm)
- Réglage par télécommande (batterie de secours)
- Plan de couchage et composants en acier inoxydable (anticorrosion)
- Plan de couchage moulé en polyuréthane
- Trous d'évacuation avec collecteur d'eau intégré
- Lumières LED intégrées avec variateur de couleurs
- 1 partie-tête inclinable (modèle 1500 mm)
- 2 partie-tête inclinables (modèle 1800 mm)




Options

- Taille du plan de couchage 1500 ou 1800 x 700 mm
- Barrières de sécurité rabattables
- Barrières réversibles
- Plan de couchage équipé de pare-chocs


Caractéristiques techniques

Modèle	Table de change et de douche murale à hauteur réglable électrique CTX
Références	36.00.1500 (1500 mm) 36.00.1800 (1800 mm)
Plan de couchage	1500 mm x 700 mm 1800 mm x 700 mm
Hauteur réglable	150 mm - 890 mm (740 mm)

Caractéristiques

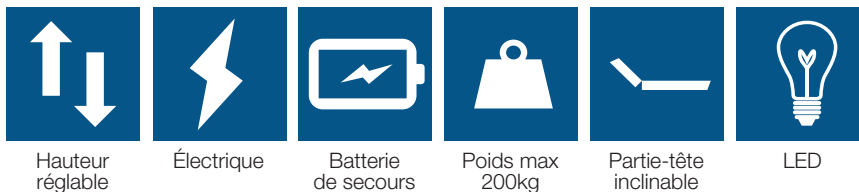

Options

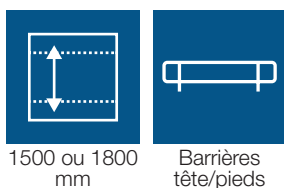


Applications



ENFANTS

CTX150 (1500)

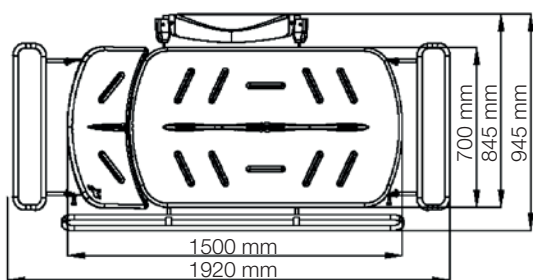

ADULTES

CTX180 (1800)

